



Exemple de configuration

Paniers à mailles | PG 8582, PG 8592

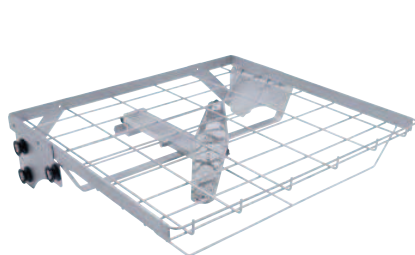

A 103 Panier supérieur

- Ouverture frontale
- Pour divers compléments
- Hauteur de chargement : 95 mm
- Bras de lavage intégré
- Convient particulièrement aux paniers à mailles DIN et à d'autres instruments de petite taille (hauteur)
- 133 x 528 x 528 mm (H x l x P)

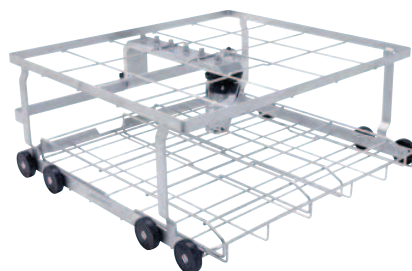

A 202 Chariot de chargement

- Pour 4 paniers à mailles DIN sur 2 niveaux
- Bras de lavage intégré
- Dimensions de chargement :
Niveau 1 : avec cadre de support H 95, l 519, P 485 mm,
sans cadre de support H 135, l 494, P 500 mm
Niveau 2: H 135, l 516, P 462 mm
- 6 autres possibilité de raccordement pour instruments à cavité grâce à des adaptateurs Luer-Lock
- Cadre de support pour paniers à mailles DIN (amovibles si traitement de charges hautes telles que les haricots)
- 223 x 531 x 542 mm (H x l x P)



6 x E 142 compléments 1/2 panier à mailles

- Panier à mailles DIN
- Plaque de tôle 1 mm, largeur de maille 5 mm, cadre 5 mm
- deux poignées rabattables
- Charge maximale 10 kg
- 45/55, 255, 480 mm (H x l x P)

Exemple de configuration MIC | PG 8592




A 203 Chariot de chargement

- Pour matériel MIC
- Chargement sur 2 niveaux
- Peut contenir :
 - E 451 panier à mailles pour petits éléments
 - E 457 complément pour instruments MIC démontables
 - E 460 complément pour optiques rigides
 - E 473 panier à mailles pour petites pièces
 - E 444 complément cylindrique pour câbles à fibre optique et tuyaux d'aspiration
- 520 x 531 x 542 mm (H x l x P)

Sont fournis :

- 3 x E 336 douille de rinçage, 121 mm
- 2 x E 362 vis d'obturation
- 15 x E 442 douille de rinçage, 121 mm, pour instruments MIC de 4 à 8 mm de diamètre
- 5 x E 443 douille de rinçage, 121 mm, pour instruments MIC de 8 à 12 mm de diamètre
- 1 x E 445 12 capuchons, ouverture : 6 mm pour douille de rinçage
- 1 x E 446 12 capuchons, ouverture : 10 mm pour douille de rinçage
- 3 x E 447 adaptateur femelle, pour Luer-Lock mâle
- 6 x E 448 tuyau silicone de 300 mm de long, 5 x 1,5 mm avec adaptateur Luer-Lock, mâle
- 5 x E 449 adaptateur femelle, pour Luer-Lock mâle
- 1 x E 451 complément 1/6 panier avec couvercle
- 3 x E 452 buses d'injection, Ø 2,5 x 60 mm
- 8 x E 453 buses d'injection, Ø 4,0 x 110 mm av. pince de maintien
- 6 x E 454 buses d'injection pour la douille de trocart 10 à 15 mm
- 4 x E 456 écarteurs pour instruments MIC (ciseaux, clips, etc.)
- 3 x E 464 support pour buses d'injection E 454

Exemple de configuration MIC et paniers | PG 8592

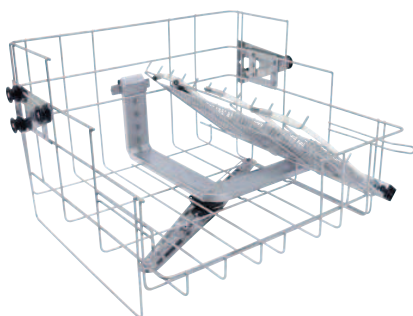

A 104 Panier supérieur/Injecteur


- Pour peu d'instrumentation à cavité
- Pour instruments MIC, arthroscopie, endoscopie, urologie
- Côté gauche pour compléments
- Côté droit pour 11 instruments à cavité
- Quatre adaptateurs Luer-Lock disponibles pour autres instruments à cavité
- Avec bras de lavage : les paniers peuvent être installés sur les paniers inférieurs.
- 332 x 528 x 526 mm (H x l x P)

A 151 Panier inférieur / Panier ouvert en façade

- Pour paniers à mailles DIN et divers compléments
- Hauteur de chargement en fonction du panier supérieur choisi
- 88 x 531 x 522 mm (H x l x P)

Exemple de configuration

Anesthésie | PG 8592

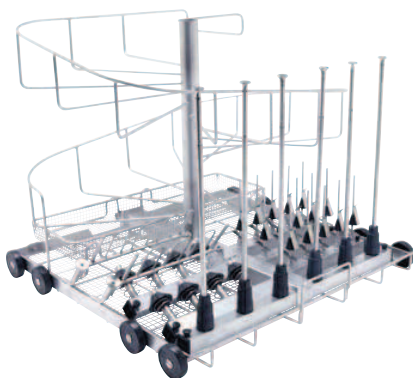

A 201 Chariot de chargement

- Pour jeux AN
- 8 buses avec supports sur ressorts pour tuyaux annelés d'une longueur allant jusqu'à 1,50 m
- Placement sur spirale
- 15 buses d'injection pour matériel d'intubation
- 434 x 531 x 546 mm (H x l x P)

Sont fournis :

- 1 x E 430 panier à mailles
- 1 x E 432 support pour 3 à 4 tuyaux de réanimation annelés
- 2 x E 433 support pour 3 à 4 tuyaux de réanimation en silicone
- 1 x E 434 support pour 3 à 4 tuyaux de réanimation pour enfants
- 6 x E 466 buses d'injection pour ballon d'anesthésie, 8 x 333 mm
- 1 x E 431 buse d'injection pour soufflet, 8 x 193 mm
- 15 x E 496 buses d'injection, Ø 4 x 120 mm
- 1 x A 3 filet de protection

Exemple de configuration

Ophtalmologie | PG 8592



A 204 Chariot de chargement

- Pour micro-instruments (chirurgie oculaire)
- Bras de lavage intégré
- Chargement sur 2 niveaux :
 - Niveau 1 pour compléments : (ex. : E 441/1 ou E 142)
 - Niveau 2, côté droit : 22 raccords pour instruments à cavité (10 adaptateurs Luer-Lock, mâle, 10 adaptateurs Luer-Lock, femelle)
 - Niveau 2, côté gauche : 11 adaptateurs Luer-Lock, mâle, avec tuyau, rangement horizontal
 - Tuyau de filtration A 800 compatible toutes barres d'injection (non fourni)
- 365 x 531 x 542 mm (H x l x P)

A 800 Tuyau de filtration


- Filtre en fibre polymesh et acier inoxydable pour panier supérieur A 105 et chariot de chargement A 204
- Largeur des mailles 63 µm
- Réutilisable avec brosse de nettoyage A 804
- P 405 mm, Ø 22,5 mm

A 804 Brosse de nettoyage (non représenté)

- pour nettoyer le tuyau de filtration A 800
- Brosse tournée avec embout en spirale
- Extrémité de manche avec oeillet
- Longueur 500 mm, longueur brosse 100 mm


Exemple de configuration

Sabots de bloc OP | PG 8582, PG 8592

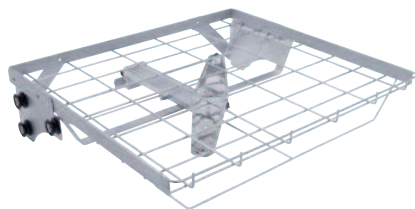

A 103 Panier supérieur

- Ouverture frontale
- Pour divers compléments
- Hauteur de chargement : 95 mm
- Bras de lavage intégré
- Convient particulièrement aux paniers à mailles DIN et à d'autres instruments de petite taille (hauteur)
- 133 x 528 x 528 mm (H x l x P)

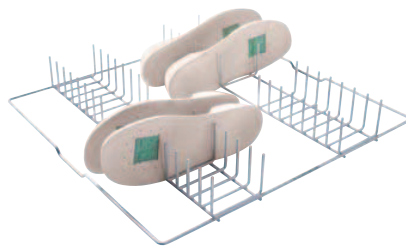

A 308 Complément

- Pour jusqu'à 34 semelles pour sabots de bloc OP
- Pour utilisation sur panier supérieur ou inférieur
- 71 x 475 x 445 mm (H x l x P)



A 151 Panier inférieur / Panier ouvert en façade

- Pour paniers à mailles DIN et divers compléments
- Hauteur de chargement en fonction du panier supérieur choisi
- 88 x 531 x 522 mm (H x l x P)




A 307 Complément

- Pour 20 sabots de bloc OP (sur supports de 265 mm de long)
- Pour utilisation sur panier inférieur
- Pour sabots jusqu'à la taille 48
- 279 x 475 x 380 mm (H x l x P)

Exemple de configuration

ORL | PG 8582, PG 8592

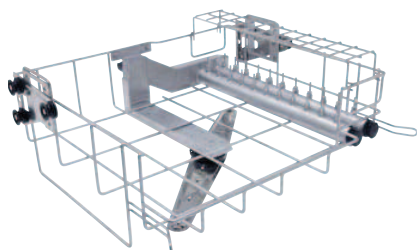

A 105 Panier supérieur/à injection

- Côté gauche pour divers compléments
- Côté droit pour grilles de support et 22 buses d'injection pour instruments rotatifs et canules
- 5 x buses de lavage E 336, par exemple pour aspirateurs chirurgicaux
- Tuyau de filtration A 800 compatible avec chacune des deux barres d'injection (non fourni)
- Bras de lavage intégré
- Réglable en hauteur
- 202 x 528 x 528 mm (H x l x P)



A 800 Tuyau de filtration

- Filtre en fibre polymesh et acier inoxydable pour panier supérieur A 105 et chariot de chargement A 202
- Largeur des mailles 63 µm
- Réutilisable avec brosse de nettoyage A 804
- P 405 mm, Ø 22,5 mm

A 804 Brosse de nettoyage (non représenté)

- pour nettoyer le tuyau de filtration A 800
- Brosse tournée avec embout en spirale
- Extrémité de manche avec œillet
- Longueur 500 mm, longueur brosse 100 mm



A 151 Panier inférieur / Panier ouvert en façade


- Pour paniers à mailles DIN et divers compléments
- Hauteur de chargement en fonction du panier supérieur choisi
- 88 x 529 x 546 mm (H x l x P)

Autres accessoires :

- E 800 Complément pour 3 paniers à mailles
- 3 x E 146 complément 1/6 panier à mailles avec couvercle
- E 417 complément 2/5 pour 30 spéculums auriculaires et nasaux
- E 499 dispositif de nettoyage pour canules
- E 379 complément 1/2 panier à mailles
- E 790 pièces de raccordement Luer-Lock fem./fem.
- E 791 pièces de raccordement Luer-Lock fem./mâle
- E 792 raccordement Luer-Lock mâle avec tuyau silicone

Exemple de configuration

Gynécologie | PG 8582, PG 8592

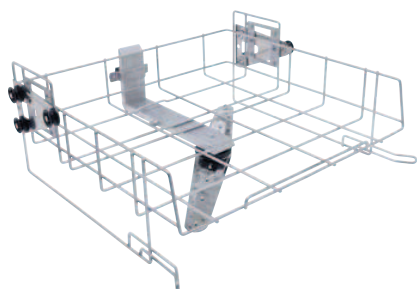

A 102 Panier supérieur / panier ouvert en façade

- Ouverture frontale
- Pour divers compléments
- Réglable en hauteur
- Hauteur de chargement : 205 +/- 30 mm
- Bras de lavage intégré
- 206 x 528 x 527 mm (H x l x P)



2 x E 416 1/4 complément

- Pour 6 spéculums en une ou deux parties
- 7 supports, distance 40 mm
- Pour panier supérieur ou inférieur
- 157 x 178 x 279 mm (H x l x P)



A 151 Panier inférieur / Panier ouvert en façade

- Pour paniers à mailles DIN et divers compléments
- Hauteur de chargement en fonction du panier supérieur choisi
- 88 x 529 x 546 mm (H x l x P)



E 378 complément 1/1 panier à mailles

- Pour divers ustensiles
- Plaque de tôle 0,8 mm, largeur de maille 1,70 mm, cadre 5 mm
- 2 poignées de transport
- Pour panier inférieur
- 80/110, 460, 460 mm (H x l x P)