

NEW HOSPIVAC

NOUVEAU DESIGN

**Ergonomique, Esthétique
& Hygiénique**

FONCTIONNEMENT VIA PEDALE
Bouton électronique avec mode double
a : Continu - **b** : Intermittent



BOCAL GAUCHE
Orifice d'aspiration



Capacités d'aspiration disponibles :

HOSPIVAC 350
Max 60L/min, -675 mmHg

HOSPIVAC 400
Max 90L/min, -675 mmHg

Les options possibles:

"BASIC" : Avec un seul orifice d'aspiration, le changement des tuyaux d'un bocal à l'autre est manuel.

"PEDALE" : Pour la commande de l'aspiration, deux modes « continue ou discontinu »

"COMPLET" : Avec pédale et sélecteur de bocal. Double orifices d'aspiration, changement d'un bocal à l'autre par bouton électronique.

Bocaux :

Double bocaux autoclavables & réutilisable (2 ou 4 litres) ou bocaux à usage unique (2 ou 3 litres) ; disponibles pour tous les modèles.

ROULLETTES

Quatre roulettes antistatiques dont deux avec freins.



Fabriqué en Italie

CE 0123

La dernière innovation des systèmes d'aspiration au bloc opératoire

PERFORMANT

Extrêmement Silencieux 'Système ERNL'
Stable , Vibration Minime 'Système VRS'




POIGNEE

Ergonomique, et pratique pour une manutention facile (en arrière)



SELECTEUR DE BOCAL

Choix de bocal , bouton électronique
a : Pour bocal de gauche - **b** : Droit

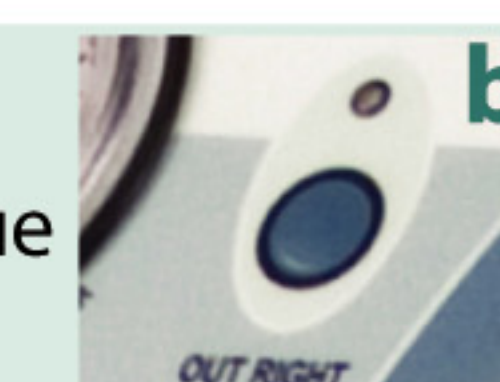

BOCAL DROIT

Orifice d'aspiration



COMPARTIMENT

Pour le rangement des accessoires, câble d'alimentation, manuels (en arrière)



POMPE CYLINDRIQUE A PISTON

Sans graissage ni maintenance.
Durée de vie 10 000 heures minimum.
5 ans de garantie.

THOMAS
A Gardner Denver Product

CA-mi

CA-MI snc

tel +39 0521 637133
fax +39 0521 639041

export@ca-mi.it
www.ca-mi.it