

SARAYA

Professional Hygiene Solutions

Dispensateur automatique de désinfectant actionné avec pile

DISPENSATEUR AUTOMATIQUE UD 1000



**Un détecteur à la pointe de la technologie
au bénéfice de votre hygiène**

Le dispensateur automatisé évite la contamination liée au contact.

Des dosages exacts qui optimisent le rendement

Le système de détecteurs offre une désinfection maximale en distribuant exactement la quantité préalablement mesurée de désinfectant.



Aussi pour savon!



SARAYA Europe

Comprend

Une technologie totalement automatisée

L'unité se déclenche sans contact et distribue exactement la quantité préalablement mesurée de désinfectant [1,4 ml] ou de savon [0,75 g].

Un bouton de réglage du détecteur

La zone couverte par le détecteur peut être ajustée grâce à un bouton de réglage.

Un système comportant un interrupteur de sécurité

L'interrupteur de sécurité endigue la perte de désinfectant lorsque le couvercle frontal est ouvert.

Position en mode personnalisé

Le bouton de sélection vous permet de choisir une ou deux distributions par détection suivant les préférences individuelles.

Clef de verrouillage

Le verrouillage du corps principal empêche

le mélange du désinfectant ou du savon avec d'autres substances.

Une lampe LED conviviale

Lorsque la lampe LED rouge clignote, elle indique un affaiblissement des piles. La lampe s'éclaire de vert lorsque l'unité est en mode de fonctionnement.

Une source d'énergie indépendante

4 piles alcalines de type D actionnent l'unité de façon ininterrompue plus de 100.000 fois.

Une flexibilité maximale d'installation

Utilisant des piles, le dispensateur peut être placé virtuellement n'importe où, comprenant l'option d'un support mural ou bien d'un pied indépendant.


Une fenêtre de contrôle pour le liquide

La fenêtre transparente vous permet de vérifier le niveau du liquide sans avoir à ouvrir le couvercle frontal.

Caractéristiques

Nom du produit:	Dispensateur automatisé	
Modèle:	UD 1000	
Dimensions:	144 x 106 x 255 mm (L/P/H)	
Poids:	740 g (excluant produits, accessoires inclus etc)	
Matériaux utilisés:	Couverture frontale:	ABS
	Corps principal:	ABS
	Fenêtre:	PP
Dosage:	environ 1,4 ml de désinfectant ou 0,75 g de savon par dispense	
Source d'énergie:	(4) piles alcaline de type D	
Capacité:	1 L	

Dimensions (mm)

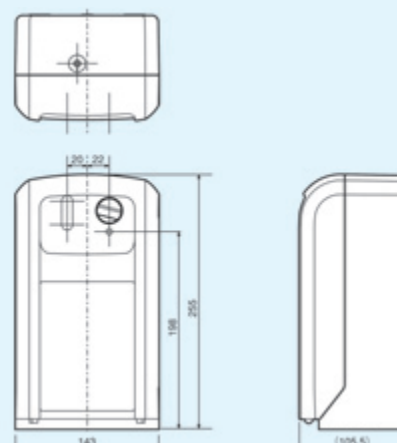

Tous droits réservés Saraya Europe. Les caractéristiques mentionnées ci-dessus sont susceptibles de changer sans notification ni obligations de la part du fabricant.