

Miele




Performance & Excellence.
En version Compact.



**Découvrez le
laveur-désinfecteur
compact* :**
Appareil « Tout en 1 ».

* Conforme à la norme NF EN ISO 15883-1/2/5, Dispositifs médicaux classe IIb - CE 0297.
Lire attentivement les instructions figurant sur la notice. Dispositifs médicaux non remboursables par la Sécurité Sociale.

Tiroir intégré
et espace optimisé
dans la cuve

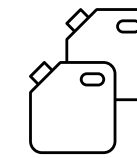

**Espace pour
2 bidons de 5 litres**
pour les produits
chimiques + 1 bouteille
de produit de rinçage

Utilisation tactile  **intuitive** et **rapide**



**Pour toutes
les disciplines
dentaires**



Seulement 30 minutes
pour un traitement efficace
de vos instruments

Conception **durable**.
Programmes optimisés.

Conçu pour durer longtemps : pièces de rechange disponibles jusqu'à 15 ans après l'arrêt de la production.



**Miele MOVE
MedDent+**



En savoir plus sur CompactLine
www.miele.fr/pro/compactline-dent

Six raisons

qui prouvent que
CompactLine
est la solution qu'il
vous faut

01

Solution optimisée et compacte

CompactLine est la solution idéale pour les cabinets disposant d'un volume d'instruments réduit, car elle permet un traitement efficace tout en étant peu encombrante. Elle est équipée d'un système de stockage et de dosage intégré pour les produits chimiques, ce qui permet d'accéder facilement aux bidons pour plus de commodité. CompactLine offre à la fois performance et rapidité, en répondant aux besoins exigeants de votre cabinet.



02

Solution rapide et intuitive

CompactLine propose un programme rapide de désinfection pour tous les types d'instruments dentaires, permettant d'obtenir des résultats en seulement 30 minutes. L'écran tactile de 7 pouces vous permet d'accéder facilement à votre programme, tandis que l'affichage à l'écran de tutoriels facilite la maintenance et le dépannage de l'appareil. L'affichage d'icônes indique également l'état du programme et une notification de fin de cycle, garantissant ainsi un fonctionnement fluide et sans problème.

03

Solution pratique et flexible

CompactLine améliore les flux de travail grâce à l'éclairage de l'intérieur de la cuve qui assure une bonne visibilité pendant le chargement et le déchargement. Ses composants et compléments spécialement conçus pour les besoins des cabinets dentaires permettent le traitement complet de tous les instruments. Il est possible de modifier rapidement la langue d'utilisation à l'aide d'un bouton tactile sur l'écran.

04

Solution performante et fiable

La pompe à vitesse variable CompactLine adapte la pression de lavage aux exigences propres à chaque phase du cycle. Des capteurs intégrés contrôlent le fonctionnement du bras de lavage et la pression de lavage, garantissant ainsi des performances fiables. Les filtres à plusieurs niveaux offrent également une sécurité supplémentaire. CompactLine est conforme à toutes les normes internationales du secteur dentaire, notamment la norme ISO 15883, pour plus de tranquillité.



05

Solution durable et pérenne

Testé sur 15.000 heures de fonctionnement, CompactLine garantit durabilité et fiabilité. Les pièces de rechange restent disponibles pendant au moins 15 ans après l'arrêt de la production. Les programmes économiques du système optimisent l'efficacité grâce à des durées d'activité courtes, ce qui permet d'économiser de l'eau, de l'énergie et des produits chimiques. CompactLine allie technologie de pointe et développement durable grâce à son mode d'emploi numérique et à son emballage écologique.

06

Solution intelligente et facile d'entretien

Connectez votre appareil au réseau de votre cabinet, avec une mise en place rapide et facile. CompactLine offre une traçabilité sécurisée, avec des droits d'accès personnalisables pour un meilleur contrôle. Grâce à Miele MOVE MedDent+, vous pouvez accéder à distance aux données de l'appareil depuis n'importe où, et recevoir directement des notifications en cas d'erreur.

Une vue d'ensemble compacte

Cette solution offre un lavage et une désinfection rapides et hygiéniques, avec des fonctionnalités avancées pour des opérations rationalisées, garantissant ainsi des résultats sûrs et efficaces.

Tiroir pour produits chimiques

- Fonction Push2Open, pour une manipulation plus facile
- 2 ou 3 pompes doseuses intégrées pour les produits chimiques liquides
- Canne d'aspiration avec détection du niveau de liquide pour une plus grande sécurité du processus et un réapprovisionnement facile en produits chimiques

Cuve optimisée

- Hauteur de porte ergonomique pour un plus grand confort d'utilisation
- Éclairage de la cuve pour une visibilité complète
- Pompe à vitesse variable puissante pour un nettoyage efficace
- Soudage laser (sans soudure apparente) pour une hygiène optimale

Écran tactile intuitif

- Symboles et notifications sur l'état de l'appareil
- Tutoriels pour réaliser la maintenance de routine

Connectivité et traçabilité

- Wi-Fi intégré au bandeau de commande, LAN en option
- Données de l'appareil consultables à tout moment et depuis n'importe où avec Miele MOVE MedDent+, pour une optimisation des processus
- Accès aux mises à jour de l'appareil et transparence totale des données de processus

Programme efficace


- Nettoyage et désinfection des instruments dentaires en seulement 30 minutes
- Fonction AutoOpen pour un séchage efficace
- Programmes supplémentaires et options de départ différé disponibles



Convient à tous les instruments dentaires

Avec sa large gamme de paniers spécifiquement étudiés pour différents types d'instruments, la solution CompactLine est idéale pour les professionnels pratiquant toutes les disciplines dentaires, ainsi que pour les équipes pluridisciplinaires. Grâce à un système flexible, chaque charge peut être optimisée pour que l'appareil fonctionne à pleine capacité. Cela vous permet d'économiser du temps, de l'argent et des ressources.

Exemples de chargements :

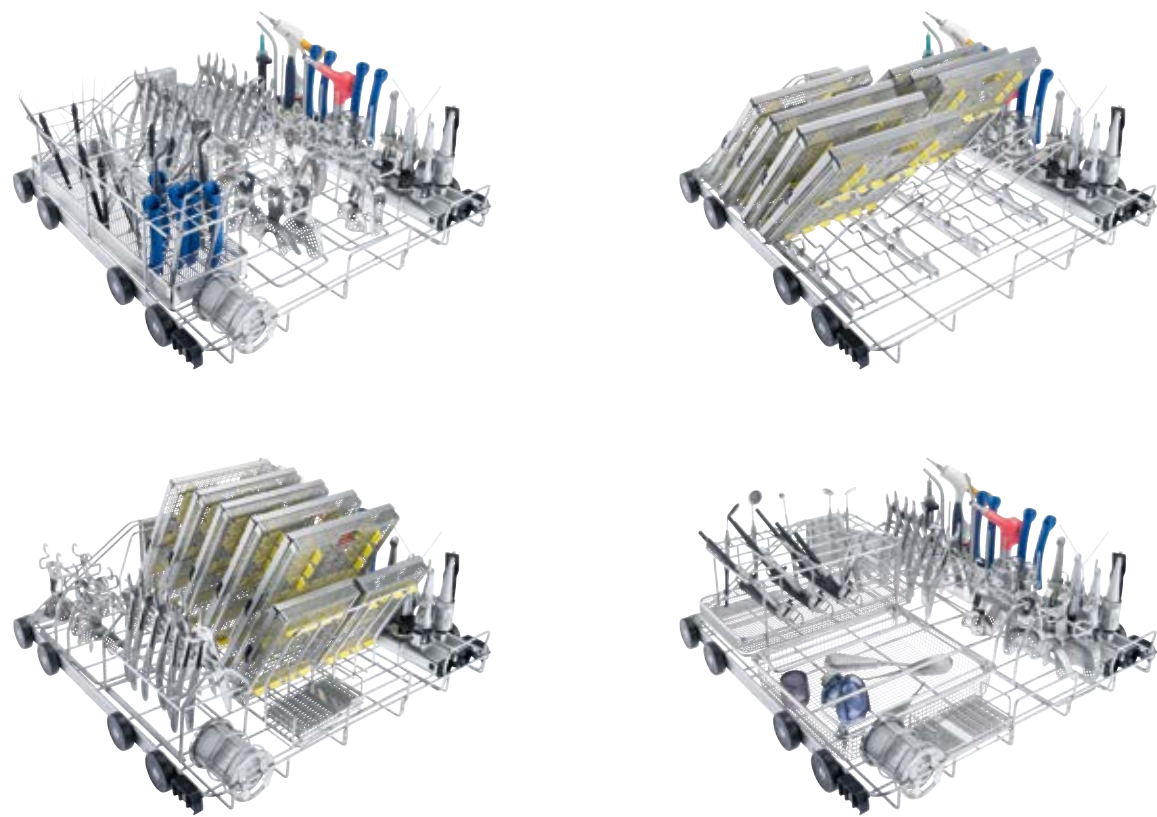

Des produits chimiques parfaitement adaptés

Spécialement conçus pour les laveurs-désinfecteurs Miele Professional, les produits chimiques ProCare Dent fonctionnent en parfaite synergie avec les programmes CompactLine pour offrir des résultats de lavage et de désinfection exceptionnels, tout en traitant vos instruments en douceur et en préservant leur longévité. Découvrez l'intégralité de la gamme, des produits de lavage et agents neutralisants aux produits de rinçage, en passant par les solutions pour la maintenance de routine des appareils.



Découvrez ProCare Dent
www.miele.fr/pro/procaudent



Laveur-désinfecteur	PWD 8682 C DST*
Unité encastrable/autonome avec couvercle	◆
Pompe de circulation [Qmax. l/min]	500
Commandes/programmes	
TouchControl/nombre de programmes	13
Emplacements de programmes vacants	5
AutoClose : verrouillage de porte automatique	◆
LED pour l'éclairage de la cuve	2
Signal sonore à la fin du programme	◆
Module de communication Ethernet	En option
Module de communication Wi-Fi	◆
Raccordements à l'eau	
1 x eau froide, pression d'eau de 2,0–10 bar (200–1,000 kPa) (protection contre le retour d'eau polluée conformément à la norme EN 1717)	◆
1 x eau déminéralisée, pression d'eau de 2,0–10 bar (200–1,000 kPa) (protection contre le retour d'eau polluée conformément à la norme EN 1717)	◆
1 x eau chaude, pression d'eau de 2,0–10 bar (200–1,000 kPa) (protection contre le retour d'eau polluée conformément à la norme EN 1717)	◆
Nombre de tuyaux d'arrivée d'eau, 1/2 po avec raccord 3/4 po, L = env. 2,0 m	3
Pompe de vidange Ø 22, hauteur de refoulement : max. 100 cm	◆
Système Aquasécurité (WPS)	◆
Raccordement électrique	
3N 400 VCA 50 Hz convertible vers 230 VCA 50 Hz, câble d'alimentation électrique env. 2,0 m, 5 x 2,5 mm ² y compris prise CEE	◆
Chauffage [kW]	8,5
Pompe de circulation [kW]	0,8
Puissance totale de raccordement [kW]	9,3
Protection par fusible [A]	3 x 16
Systèmes de dosage	
1 pompe doseuse pour le produit de lavage liquide (longueur de la canne d'aspiration : 217 mm, utilisable pour des bidons d'une hauteur maximale de 202 mm)	◆
1 pompe doseuse pour l'agent neutralisant (longueur de la canne d'aspiration : 217 mm, utilisable pour des bidons d'une hauteur maximale de 202 mm)	◆
1 pompe doseuse pour le produit de rinçage (longueur de la canne d'aspiration : 217 mm, utilisable pour des bidons d'une hauteur maximale de 202 mm)	◆
Adoucisseur d'eau	
Pour eau chaude et froide, max. 65 °C	◆
Condenseur de vapeur	
Aérosol	◆
Dimensions, poids	
Dimensions extérieures : h/l/p [mm]	835/600/600
Dimension de la cuve : h/l/p [mm]	400/536/523
Surface utile du panier inférieur : h/l/p [mm]	280/490/498
Poids [kg]	81
Dimensions du compartiment	
Surface utile : h/l/p [mm], pour 2 bidons de 5 litres	240/305/285
Surface utile : h/l/p [mm], pour 1 bouteille de 1 litre	240/160/125
Options d'habillage extérieur	
Blanc lotus	◆
Inox	◆
Respect des normes	
NF EN ISO 15883-1/2, EN 61010-2-040, EN 61326-1	◆
Certificats d'essais	
IP 21	◆
CE 0297	◆
UE 2017/745 (règlement relatif aux dispositifs médicaux)	◆

* Conformés à la norme NF EN ISO 15883-1/2/5, Dispositifs médicaux classe IIb - CE 0051.
Lire attentivement les instructions figurant sur la notice. Dispositifs médicaux non remboursables par la Sécurité Sociale.



Votre appareil mérite le meilleur service.

Réparations et pièces de rechange

Notre objectif est de remédier aux pannes le plus rapidement possible. Nous sommes là pour vous aider, coordonner les rendez-vous et vous proposer les pièces de rechange dont vous avez besoin, pendant au moins 15 ans après l'arrêt de la production de votre appareil.

Maintenance périodique

Une maintenance préventive régulière est essentielle pour éviter toute perturbation dans votre travail quotidien. Choisissez l'un de nos forfaits de services et profitez d'une protection à long terme pour vos appareils.

Inspections et maintenance

Des contrôles réguliers améliorent la sécurité opérationnelle et garantissent des performances de nettoyage de haute qualité. Nous sommes également à votre disposition pour vous conseiller sur la maintenance optimale pour vos appareils.



Notre service s'appelle PROtect.

PROtect combine des services complets, un contrôle maximal des coûts et une disponibilité continue des pièces de rechange. Notre équipe de professionnels effectue les tâches de maintenance de manière rapide et fiable, garantissant ainsi une installation optimale et une disponibilité opérationnelle continue.



Découvrez nos solutions de services PROtect.
www.miele.fr/pro/protect

Quand conception innovante rime avec **responsabilité durable.**

Le développement durable est au cœur des préoccupations de conception de la gamme CompactLine. Ses programmes économes en ressources minimisent la consommation d'eau, d'énergie et de produits chimiques, tandis que ses réglages personnalisables garantissent des performances optimales. Conçus pour être durables et résistants, les appareils de la gamme CompactLine ont une longue durée de vie et se réparent facilement.



Pour en savoir plus sur le développement durable, rendez-vous sur notre site Miele Professional
www.miele.fr/pro/durabilite



La confiance dans la marque Miele

Miele Professional offre performance et qualité. 97 % des clients achèteraient à nouveau chez Miele, confiants dans l'excellence dont nous faisons preuve au quotidien. Les principaux fabricants d'instruments recommandent Miele pour un traitement sûr et hygiénique de ces derniers, garantissant la compatibilité des matériaux et la préservation de leur valeur.



Rien ne remplace **un contact personnel.**

Nous nous réjouissons de travailler avec vous pour trouver
la meilleure solution aux besoins de votre cabinet.

Téléphone: 01 49 39 44 44

Lu. – Ve. 08h00 – 17h00



En savoir plus sur CompactLine
(et informations de contact)
www.miele.fr/pro/compactline-dent